

Lamino

SKIN CONDITIONER

取扱説明書

 moisteane

1 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

危険: この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告: この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意: この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

記号表記の例

| | |
|--|--|
|  | △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般注意)が描かれています。 |
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。 |

※お読みになった後、ご使用になる方がいつでもご覧いただける場所に保管してください。


| △危険 | |
|--|---|
|  | 下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。 ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器 |

| △警告 | |
|--|--|
|  | 修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火、異常動作、感電事故の原因になることがあります。 |


| △注意 | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">●電池交換する時に、機器本体や電池カバーに水滴がついている場合は、速やかに取り除いてください。電池収納部に少量でも水滴が入る事により、サビや故障の原因となります。●+、-の極性を間違えないようにしてください。事故や故障の原因となります。●電池交換は、一度にすべて同じ銘柄、種類の新品の電池と交換してください。 銘柄、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 例) アルカリ乾電池とマンガン乾電池、他社製品の組み合わせ等 電池の性能に差がある電池を混ぜて使用しないでください。 例) 古い乾電池と新品の乾電池の組み合わせ等 |

2

標準セット内容と各部名称

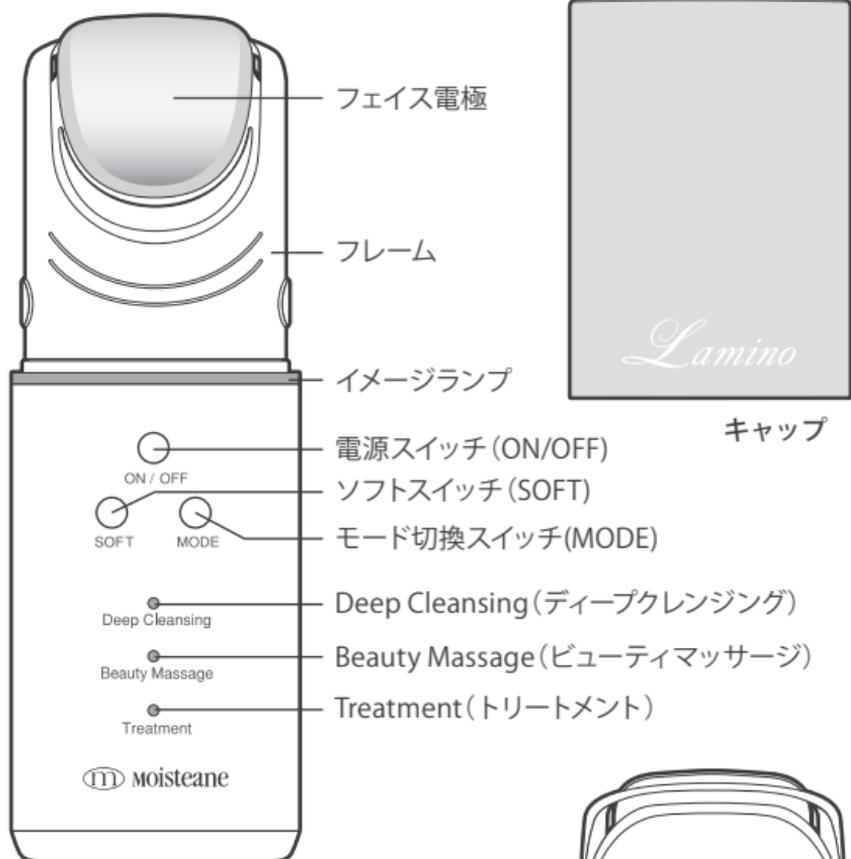


キャップ

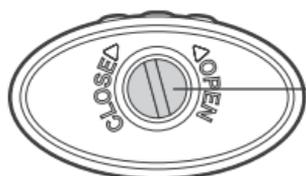



電池カバー

カバーネジ

フィンガー電極

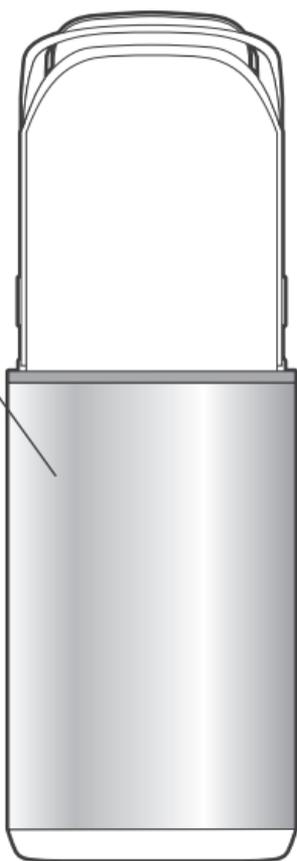


ポーチ

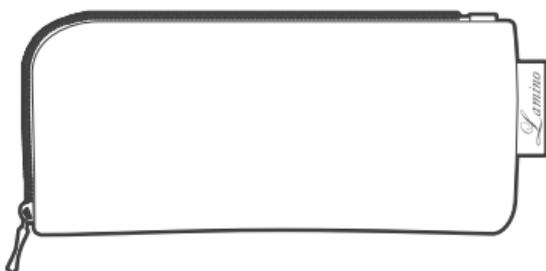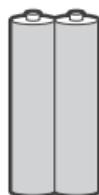アルカリ乾電池 単4形
2本 (動作確認用)


3 準備

1 電池をセットします


- ① コイン等を使い、カバーネジを“◁OPEN” (矢印) の方向に回転し(およそ3回転)電池カバーを取り外します。

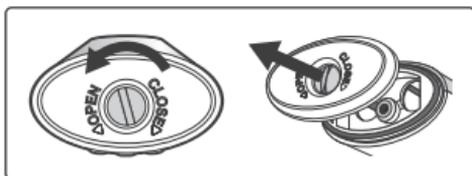

- ② ⊕⊖の極性に注意して、単4電池をセットします。
※フィンガー電極面を上にして電池ボックス内を見ていただくと極性をご確認いただけます。

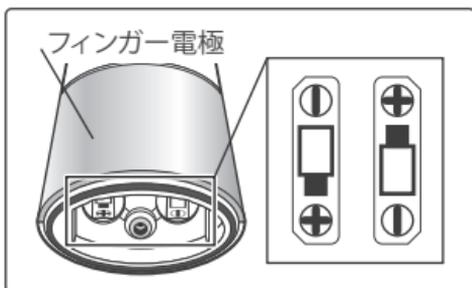

- ③ カバーネジを“CLOSE▷” (矢印) の方向に止まるまで回して(およそ3回転)電池カバーを取り付けます。

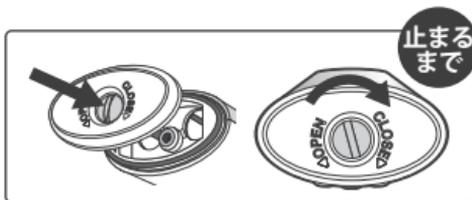

使用電池の推奨

本機器に使用する電池はアルカリ乾電池が適しています。アルカリ乾電池以外を使用しますと、電池の消耗が早く動作が停止するなど不安定になる場合があります。

電池交換の目安

アルカリ乾電池使用で1日5分間の使用をした場合、約4.5ヵ月使用できます(環境により異なる場合があります)。ご使用中(通電中)にイメージランプが赤く点滅した場合や電源を入れた時にイメージランプ及びモードランプが赤く点滅する場合は電池の残量が少なくなっているサインです。新しい電池を準備してください。



⚠ 警告



電池カバーを緩みなく取付けてください。
緩みがある場合、防滴が損なわれ故障の原因となります。


4 ご使用方法

1 コットンセットします

キャップを取り、フレームを開きフェイス電極にコットンを置いて、フレームを戻します。

別紙「フレームの取り扱いについて」
「コットンの取り付け方」を参照ください。

※ご購入時は、コットンのセットがわかるように未使用のコットンをあらかじめセットしています。

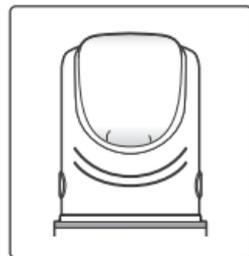


2 電源を入れます

電源スイッチを押すと電源が入り、イメージランプ: ブルー (Deep Cleansing) が点灯します。


省電力機能

電源スイッチを入れ、2分間使用せず放置すると自動的に電源が切れます。続けてご使用の場合には電源を再度入れてください。

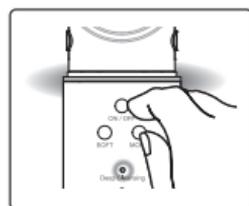

3 モードを選択します

モード切換スイッチを押し、目的にあわせてモードを切替えます。選択したモードにはランプが点灯します。

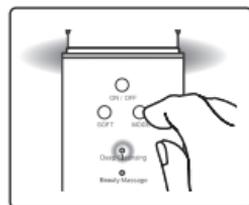

| お手入れのモード | イメージランプ(色) |
|---|------------|
| Deep Cleansing (ディープクレンジング) 毛穴の汚れを取り除きます。 | ブルー |
| Beauty Massage (ビューティマッサージ) 肌のコンディションを整えます。 | グリーン |
| Treatment (トリートメント) 美肌成分を肌に深く*浸透させます。*角質層 | パープル |

お肌の敏感な方は…

Deep CleansingまたはBeauty Massageモードを選択時、ソフトスイッチ (SOFT) を押してご使用ください。ソフトスイッチ (SOFT) 使用時にはモード表示ランプがオレンジになります。(通常時: グリーン)


⚠ 警告



機器本体は防滴仕様ですが、浴室など湿気の多い場所や直接水のかかる場所での、ご使用はしないでください。故障の原因になります。

4 お手入れをはじめます

① フェイス電極のコットン全体に、美容液等を十分に含ませます。

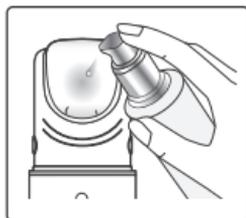

② 指や手のひらをフィンガー電極に触れるように持ち、お手入れしたい部分に1ヶ所、3秒程度軽く当てながら、肌をこすらないように気をつけて全体をお手入れします。



③ お手入れ中はイメージランプが点滅し、正常に通電されていることをお知らせします。また、30秒毎にイメージランプの色が3秒間変化します。正しく通電されていない場合は、イメージランプは点灯になります。コットンの水分量が少なかったり、フィンガー電極に正しく触れていないと正しく通電されません。前項①②をご確認ください。

④ 正常な通電が、5分間経過しますと自動的に電源が切れます。

※ 化粧水・美容液が不足していると、ピリピリ感を感じたり作動しないことがあります。

※ 通電中に、口の中で金属のような味がする場合があります。この違和感は、通電によるもので一過性です。特に安全上問題ありません。

※ お手入れ中のイメージランプがゆっくりと3秒間隔で点滅しない場合は、前項①②をご確認ください。

※ お手入れ中、モード切替を行なう場合や電源スイッチを操作する場合は、フェイス電極をお肌から離し、3秒以上待ってから操作してください。

⚠ 注意



- 本器の使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- フェイス電極を同一部位に5秒以上当てておくと肌質によって炎症を起こす恐れがあります。
- 傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常など異常のある部位には使用しないでください。
- 化粧水・美容液以外、ご使用にならないでください。皮膚に異常が生じる場合があります。

5 ご使用後 お手入れがおわったら…

ご使用後は、本体から使用済みコットンをはずし保管してください。

別紙「フレームの取り扱いについて」
“コットンの取りはずし方”を参照ください。

次項の保管要領をお読みになって保管してください。

6 保管要領

- 長期間ご使用されない場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- ご使用後は、必ずコットンをはずして保管してください。
- 美容液等が本機器にこぼれ出た場合は、乾いた布等で水気を拭き取り良く乾燥させてください。
- 故障の原因になりますので機器本体を水につけたり、水洗いは絶対にしないでください。水のかからないところ、湿気の少ないところに保管してください。
- 機器本体は直射日光を避けて、保管してください。
- 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしないでください。

△ 注 意

| | |
|--|--|
|  | 汚れを落とす時は、水か薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞った布等をお使いください。アルコール・ベンジン・シンナー等を使用しないでください。機器本体の割れの原因になることがあります。 |
|  | お子様の手に触れさせないようにご注意ください。 |

7 アフターサービス

修理、ご使用方法、美容相談などのお問い合わせは、まず『担当アドバイザー』または『ご購入のサロン』へお申し付け下さい。

弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合がございましたら『担当アドバイザー』または『ご購入のサロン』にお問い合わせください。

● 修理を依頼される場合

[お問合せ先]

① 担当アドバイザーまたはご購入のサロン

② 株式会社ホームイオン研究所

モイスティーフリーコールまで

☎ 0120-4379-39

[発送先] 株式会社ホームイオン研究所『西東京工場』

〒191-0024 東京都日野市万願寺 4-22-8

TEL : 042-584-5132

※ 修理保守対応期限は、製造終了後8年とさせていただきます。(製造〈販売〉終了商品は、弊社ホームページからご確認くださいませ。)

● ご使用方法、商品のお問合せ

担当アドバイザー、ご購入のサロンまたは

株式会社ホームイオン研究所 フリーコールまで

☎ 0120-4379-39

● 本体仕様

電 源 : DC3V(アルカリ乾電池 単4形 2本)

消費電流 : 100[mA]

出力周波数 : 1200,4800[Hz]

寸 法 : 151×48×27[mm]

質 量 : 111[g] (電池含まず)

水に対する保護等級 : IPX2 (防滴仕様)

※IPXとは、水に対する耐性レベルの指標です。

■ HOMER ION

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町17番2号

TEL:0120-4379-39

10:00~16:00 (土・日・祝日をのぞく)