

## ご使用前に

浴用美容器「モイスターバス」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本品は〈モイスターヌスパシリーズ〉と共に使用する、全身スキンケア用の浴用美容器です。

## △ 注 意

⊘ 本器と併用する入浴化粧品については、配合成分によっては肌に刺激を感じたり、発疹・赤み・はれもの・かゆみなどを生じる場合があります。その場合は直ちに使用を中止してください。

ご使用時の注意 本器はステンレスなどの金属製浴槽でご使用になると、作用が弱まる場合があります。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると、生じることが想定される内容を「危険」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

注意:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

記号表示の例

	△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※ 取扱説明書は、お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## △ 危 険


⊘ 下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。  
ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器

## △ 注 意

⊘ 使用部位の皮膚に、傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常等の異常のある方は使用しないでください。



## 標準セット内容と各部名称

## 1. 機器本体

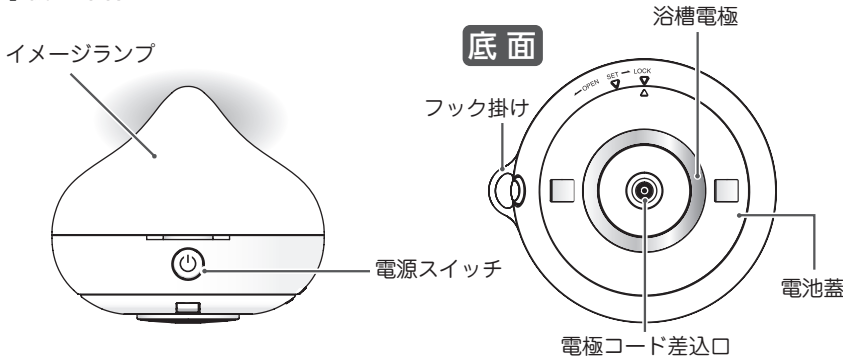

※機器本体には、安全性の高い抗菌素材を使用しています。

## 2. ボディ電極

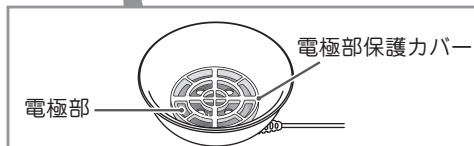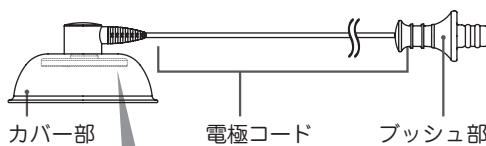


注 電極部保護カバーが外れた場合は、すみやかに電極部に取り付けてください。

## 3. 電池 (単3電池2本)



## 4. 電池蓋オープナー

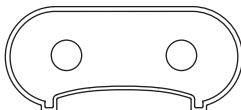

電池蓋の開閉の際ご使用ください。  
(本取扱説明書「電池交換について」参照)

## 5. S字フック



機器の保管用としてご使用ください。  
(本取扱説明書「保管要領アフターサービス」参照)

注 商品開封時には機器本体に電池はセットされておりません。本書の「電池交換について」を参照の上、電池をセットしてください。




# 使用方法

1. 入浴し、ボディ電極を浴槽内のお湯の中で体に接続します。



ボディ電極は、ウエスト(体の中心部)に付けることで、効率的にスキンケアが行えます。

**!** ボディ電極を使用中、おなか付近で刺激を感じる場合は腰につけてください。



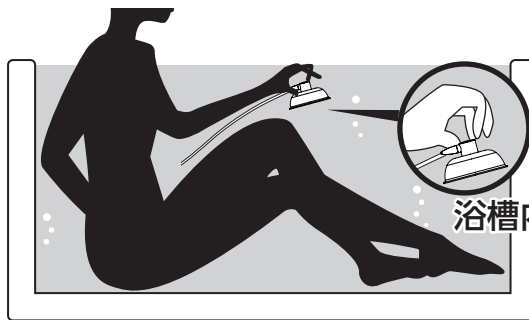


浴槽内で行う

※ボディ電極の取り付けは、浴槽内のお湯の中で行い、必ずボディ電極のカバー内にお湯が入るようにしてください。

## ボディ電極のつけ方

① ボディ電極をもち、電極部をだすようにカバー部をめくり電極部を肌にあてます。

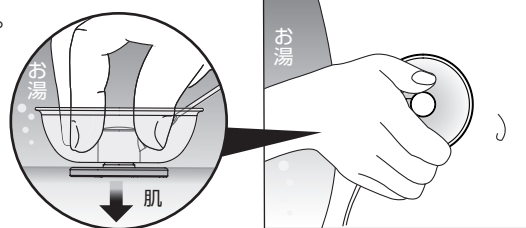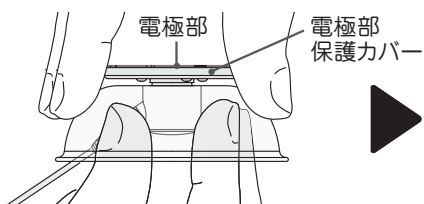
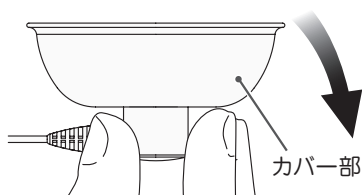


お湯の中で電極部を肌にあてる

### 注意


**!** 電極部保護カバーが電極部に付いていることを、必ず確認してください。皮膚に異常が生じる場合があります。

② ボディ電極のカバー部を戻す

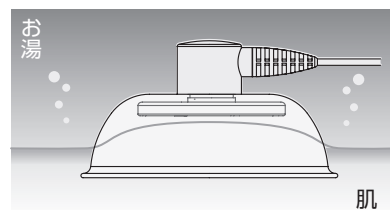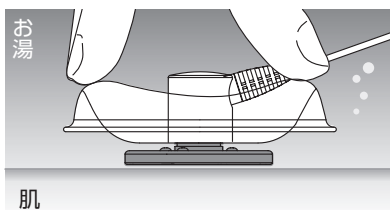

肌にボディ電極が吸い付き、ボディ電極の装着は完了です。

2. 機器本体の電源スイッチ (⏻) を押し、電源を入れます。イメージランプが点灯します。

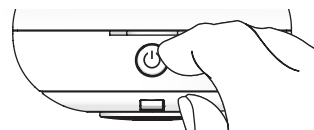

### 電池残量の確認

電池残量が十分な場合：イメージランプが“パープル(紫)”になり通電を開始します。

電池残量が少ない場合：ブザー音と共にイメージランプが10秒程度“レッド(赤)”に点滅した後、“パープル(紫)”になり正常に数回使用できます。

※電池交換をしないと動作が停止するなど不安定な状態となりますので、早めに交換をしてください。

電池残量がない場合：ブザー音と共にイメージランプが“レッド(赤)”に点灯し、電源がOFFになります。

5分間の使用を1回として約70回使用できます。(使用環境により多少異なる場合があります)

### 省電力機能

電源を入れ通電をしない状態が30秒経過した場合、自動的に電源が切れます。

3. 通電を開始します。1分経過する毎に音が鳴ります、またイメージランプの点灯がゆっくり強弱し、色が変化します。

**!** ボディ電極がお湯の中で体から外れた状態でもイメージランプの点灯がゆっくり強弱し色が変化しますが、作用していません。

経過時間	開始	1分	2分	3分	4分	終了(5分)
イメージランプ(色)	パープル	ブルー	グリーン	ターコイズ	レインボー	消灯
ブザー音	開始音	1回	2回	3回	4回	終了音




### オートOFF機能

通電開始から5分経過すると、自動的に電源が切れます。


# 保管要領・アフターサービス

## ● 保管要領について


1. ご使用後は機器本体を浴槽内から取り出し、タオルなどで表面についた水滴を軽く取り除いてください。
2. 機器本体側面のフックを利用し、しっかりと固定されたタオル掛けや手すりなど、付属のS字フックを用いて吊り掛けることができます。

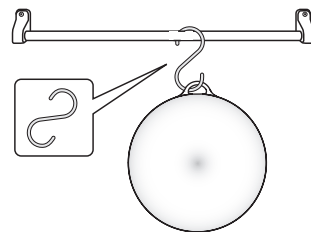


3. ボディ電極のブッシュ部は曲がると破損します。取り扱いにはご注意くださいのほどお願いします。

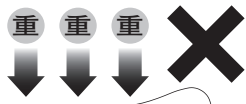

※上から重さを加えた時  
→重さが加わらない場合は問題  
ありません

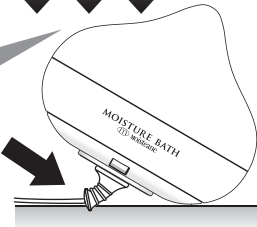

4. ボディ電極を機器本体から外すときは電極コードを持たずに、ブッシュ部を持って外して下さい。電極コードを引っ張ると断線します。

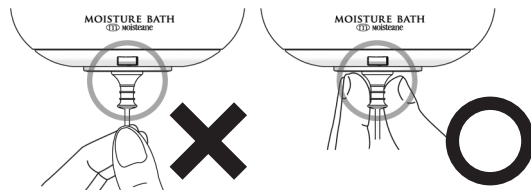

### ⚠ 注意

	ご使用後は機器本体を浴槽内に入れたままにしないでください。機器本体の故障の原因になることがあります。
	汚れを落とすとき水か薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞った布等をお使いください。アルコール・ベンジン・シンナー等を使用しないでください。機器本体の割れの原因になることがあります。

## ● アフターサービス

### ○ 修理を依頼される場合

お問合わせ先: ① 担当アドバイザーまたはご購入のサロン  
② 株式会社ホームイオン研究所 フリーコール TEL:0120-4379-39  
発送先: 株式会社ホームイオン研究所 『西東京工場』  
〒191-0024 東京都日野市万願寺4-22-8 TEL:042-584-5132

### ○ ご使用方法、商品のお問合わせ

担当アドバイザーまたはご購入のサロン  
または株式会社ホームイオン研究所  
フリーコール TEL:0120-4379-39  
10:00~16:00 (土・日・祝日をのぞく)

\*修理保守対応期限は、製造終了後8年とさせていただきます。(製造〈販売〉終了商品は、弊社ホームページからご確認いただけます)

### ⚠ 注意

	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。ケガや異常動作のもとになることがあります。
	機器本体を誤って落下させないよう取扱いにはご注意ください。ケガや破損の原因となる場合があります。

## 仕様

### MOISTURE BATH

電源: 直流 3V (単 3 電池 2 本)  
消費電流: 105mA

出力周波数: 4800Hz  
寸法: φ100 × H 87 [mm]  
重量: 約 145 [g] (本体のみ)

HOMERION

東京都渋谷区神泉町17-2