

skin conditioner

# moisteane IV

取扱説明書



# 目次

---

1. ご使用前に	1
2. 安全上のご注意	2
3. 標準セット内容と各部名称	3
4. 表示	4
5. ご使用手順	5
6. パフのコットン交換方法	7
7. ご使用後のお手入れと保管要領	8
8. お手入れフロー	9
9. オプションケア	10
10. ご使用上の注意	11
11. アフターサービス	12
12. 仕様	12

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、皆様が安全に本器を使用し、性能を実感していただけるよう、わかりやすく説明しています。

本器の使用に際し、ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。取扱説明書は、お読みになった後ご使用になる方がいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

本器は以下の3つの機能を兼ね備えたスキンコンディショナーです。

専用のコットンをセットし、化粧水や美容液などをつけてお使いください。

末永くご愛用賜われますようお願い申し上げます。

## moisteane IV 3つの機能

### マッサージモード

お肌のコンディションを整えます。

### トリートメントモード

美容成分をお肌に深く\*浸透させます。

### ウォーマー機能

お肌を温めることでマッサージモードやトリートメントモードの効率を高めます。

(※角質層)

## 2

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。




いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**危険:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。


**警告:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**注意:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。



## 記号表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。


## ⚠ 危険

	下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。 ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器
--	---

## ⚠ 警告


	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 発火、異常動作、感電事故の元になることがあります。
	本器を浴室など湿気の多い場所で使わないでください。 感電および故障の原因になることがあります。

## ⚠ 注意



	使用部位の皮膚に、傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常等の異常のある方は使用しないでください。
--	---

### 3 標準セット内容と各部名称

#### 1 機器本体

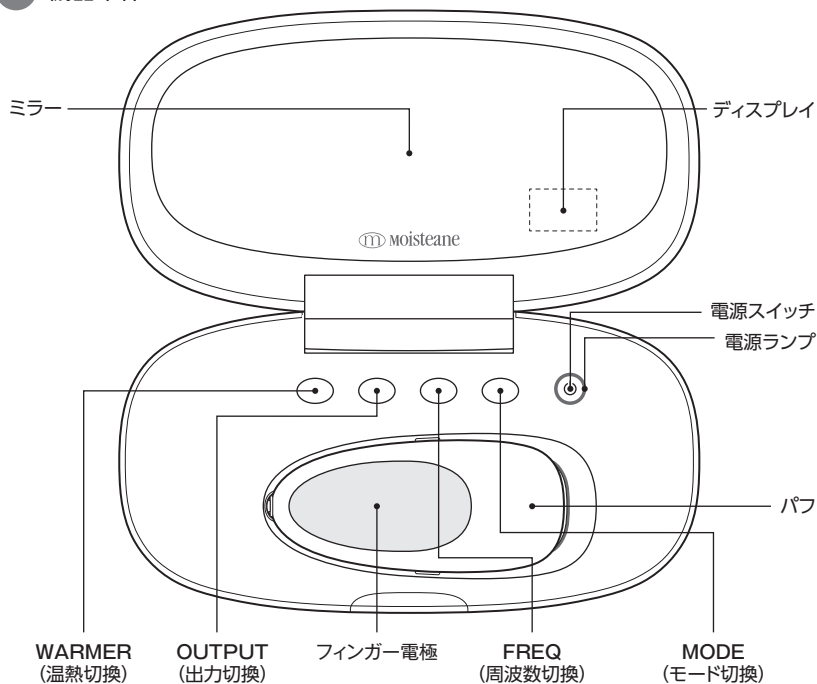

#### 2 ACアダプター

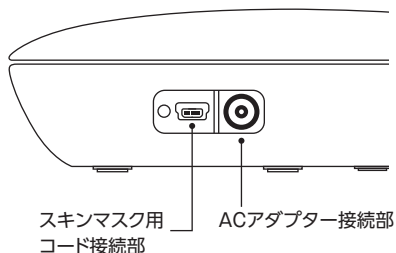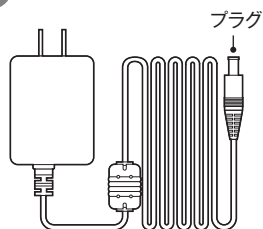

※商品改良のため、予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## 4 表示

### ディスプレイ

タイマー表示:実通電時間が表示されます。




### タッチスイッチとディスプレイ表示

※【】内はディスプレイ表示

#### タッチスイッチ

#### 初期設定画面

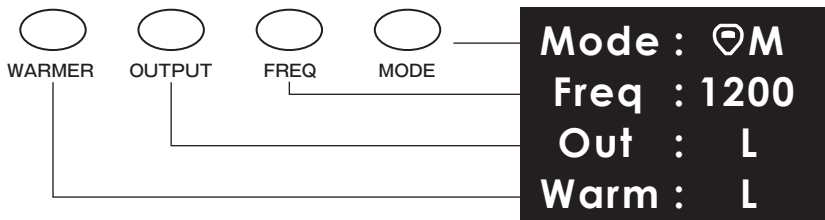

#### WARMER

【Warm】温熱表示

OFF : [-]  
LOW : [L]  
HIGH : [H]

#### OUTPUT

【Out】出力表示

SOFT:[S]  
LOW : [L]  
HIGH:[H]

#### FREQ

【Freq】周波数表示

1200Hz:[1200]  
4800Hz:[4800]

#### MODE

【Mode】モード表示

MESSAGE : [M]  
TREATMENT:[T]

※タッチスイッチの切り替えは、表記上の凹を押し、スイッチ音が終了してから離してください。



また、早く連打するとタッチスイッチが反応しない場合があります。

※MODE切り替え時、MESSAGEは1200Hz、TREATMENTは4800Hzに自動で設定されます。


### 電源ランプ表示

MODE	温熱待機時 (パフ使用時のみ)	非通電時	通電時
MESSAGE	ブルー	点灯:グリーン	3秒間隔で点滅:グリーン
TREATMENT	ブルー	点灯:パープル	3秒間隔で点滅:パープル


## 5 ご使用手順

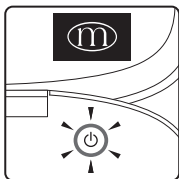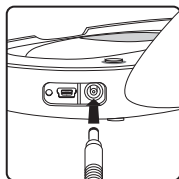

- ① ACアダプターをスキンコンディショナーに接続します。
- ② フタを開け、電源スイッチを押して電源を入れます。ディスプレイに起動ロゴが表示されます。


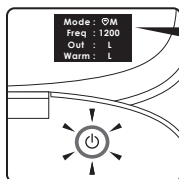


- ③ 使用可能な状態になると、電源ランプが音と共にブルーからグリーン(MASSAGEモードの場合)に変化します。同時にディスプレイ表示も初期設定画面に変わります。

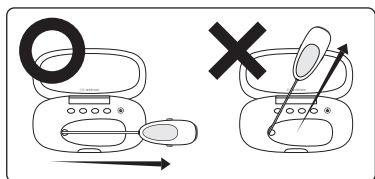

- ④ パフを取り出し、お手入れしやすい長さにコードを引いてください。

※パフは無理な力で引き出さないようにしてください。また、コードは図のように本体と平行になるように引いてください。故障・断線の原因となります。

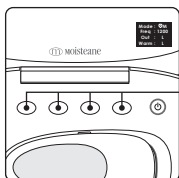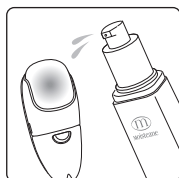

- ⑤ パフのコットンに化粧水または美容液等をよく含ませます。

※化粧水等が不足していると肌に刺激を感じたり、通電されることがあります。

- ⑥ タッチスイッチにより、お手入れ内容の設定をします。(4ページ 表示 参照)

→ タッチスイッチ

### △ 注意



本器(特に操作パネル面)に水滴や化粧水が、かからないようにしてください。異常動作、故障の原因になることがあります。



- ・本器の使用中に頭痛を感じたり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・パフ部を同一部位に5秒以上当てておくと肌質によって炎症を起こす恐れがあります。
- ・傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常など異常のある部位には使用しないでください。
- ・お顔には、OUTPUT HIGH: [H]は使用しないでください。肌質によって炎症を起こす恐れがあります。



⑦パフのフィンガー電極を持ち、コットンをお肌に優しく当て、お手入れを開始します。

⑧通電中は電源ランプが点滅し、ディスプレイ表示のタイマー表示がカウントアップします。



※フィンガー電極に触れていないと通電しません。また、コットンを過度に押し付けしないでください。肌ストレスの原因となります。

※通電中に金属のような味がする時がありますが、通電による一過性のもので安全上問題はありません。

⑨通電時間が合計で5分を経過すると自動的に電源が切れます。

⑩お手入れ終了後はコットンをはずし、パフを軽く引っ張るとコードが巻き取られます。




(7ページ ④パフのコットン交換方法 参照)

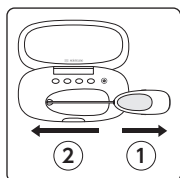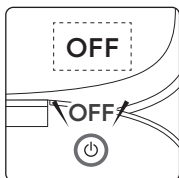

⑪フィンガー電極を上にして収納します。

⑫フタを閉じ、ACアダプターを抜きます。

※ACアダプターのプラグはまっすぐ抜いてください。傾けて抜くと、本体のACアダプター接続部が破損することがあります。

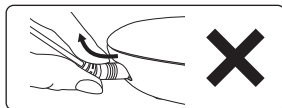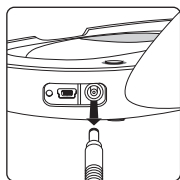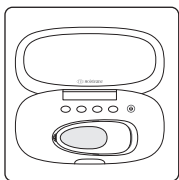

## その他機能

- ①カウントコール機能:30秒毎 …… タイマーが30秒経過毎に音でお知らせします。
- ②オートパワーオフ機能:5分 …… 通電時間が合計で5分を経過すると自動的に電源が切れます。  
※パフをお肌から離したり、化粧水等パフ部の水分が少なく電源ランプの点滅及びタイマーのカウントアップがされていない時は、通電時間としてカウントされません。
- ③セーフティパワーオフ機能:2分 …… 電源が入った状態で2分間、使用せず放置すると自動的に電源が切れます。
- ④サイレントモード機能 …… 電源スイッチを押しながらACアダプターを接続するとサイレントモードになり、電源ランプが数秒間黄色に点灯します。動作中の音やアラーム音が鳴らず、静かにお手入れすることができます。通常のご使用方法に戻すには、ACアダプターを本体から抜いて接続し直してください。

## ⚠ 警告




使用時以外は、必ず電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になることがあります。




## 6 パフのコットン交換方法


### ●パフ名称

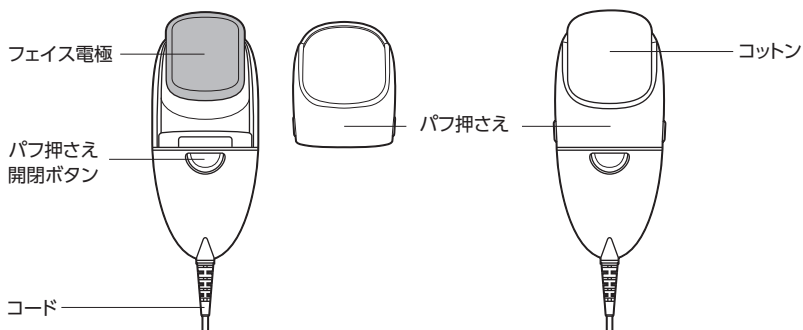


1.パフ押さえ開閉ボタンを押しながら  
パフ押さえを取り外します。

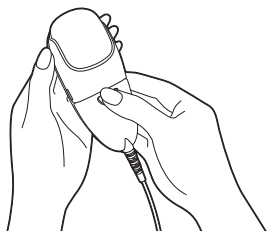


2.新しいコットンをフェイス電極に  
のせます。

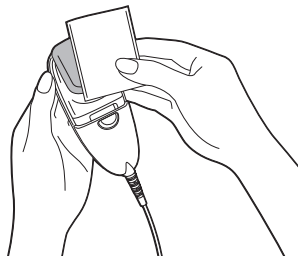

3.パフ押さえを矢印のようにパフ本体の  
溝にはめます。

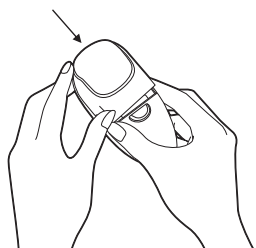

4.パフを指で固定し、パフ押さえの下部を  
パチッと音がするまで押します。

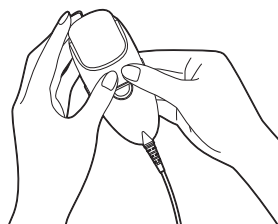

- ご使用済のコットンは必ずはずして保管してください。



- 化粧水等が本体周辺にこぼれ出た場合は、乾いた布等で水気を拭き取りよく乾燥させてください。汚れを落とすときは、水を含ませよく絞った布等をお使いください。




- 本器は、直射日光を避けて保管してください。



- 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしないでください。



- ACアダプターの出力コードは軽く束ねて保管してください。出力コードを直接本体に巻き付けしないでください。

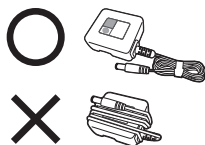

- 本器は、環境条件により変色する場合があります。性能及び安全性には影響ありませんので安心してご使用ください。



### ⚠ 注意



汚れを落とす時はアルコール、ベンジン、シンナー等を使用しないでください。機器本体の割れの原因になる事があります。




お子様の手に触れさせないようにご注意ください。ACアダプタープラグ部を口に入れますと感電をする恐れがあります。

## 8 お手入れフロー

### モイスティーヌ基礎化粧品


スキンコンディショナーの特徴を考へて開発された、基礎化粧品です。

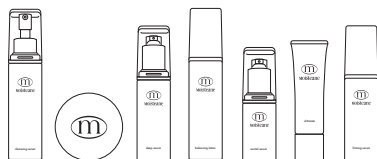

クレンジングセラム  
ヒドラソープ

### W洗顔


クレンジングとソープのW洗顔で肌表面の汚れを落とします。

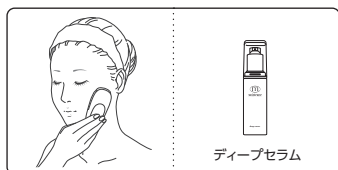

ディープセラム

### ディープ洗顔

W洗顔では落とすきれないお肌深部の汚れを取り去ります。

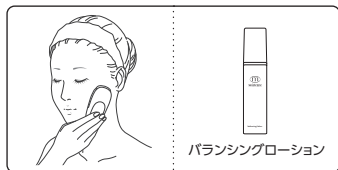

バランシングローション

### コンディショニング

お肌にうるおいを与えます。



リバイタルセラム  
ホワイトセラム  
アクノセラム

### 美容成分の浸透

お肌の状態に合わせて必要な成分を補給します。



ヴィルティオ  
ファーマーミングセラム

### 保護

うるおいを閉じ込め、お肌を刺激から保護します。


## m Moisteane

### スキンマスク & イオンシート


モイスティヌ スキンマスク、モイスティヌ イオンシート(共に別売り)を使用することで、お顔全体に美容成分を浸透させることが可能になり、より効果的なお手入れを行うことが出来ます。



モイスティヌ スキンマスク

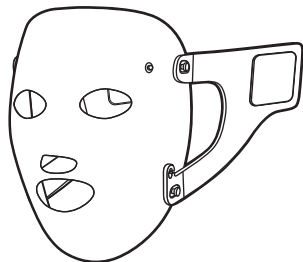


モイスティヌ イオンシート

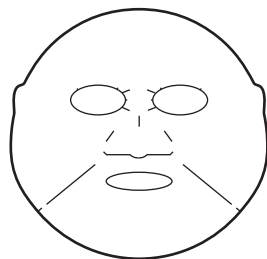

 警告

使用時以外は、必ず電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になることがあります。

 注意

本器およびACアダプターは、水につけたり、水をかけたりしないでください。異常動作、故障の原因となる場合があります。



ACアダプターをコンセントから抜く時は、コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



ACアダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となる場合があります。

修理、ご使用方法、美容相談などのお問い合わせは、  
まず『お買い上げ販売店』または『担当アドバイザー』へお申し付け下さい。

弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合がございましたら、『お買い上げ販売店』、  
または弊社『お客様相談室』にお問い合わせください。

### ● 修理を依頼される場合

[お問い合わせ先]

- ①モイスティーナサロン、ビューティアドバイザー または、
- ②株式会社ホームイオン研究所「お客様相談係」まで  
TEL:0120-4379-39

[発送先]

株式会社ホームイオン研究所「西東京工場」  
〒191-0024 東京都日野市万願寺4-22-8  
TEL:042-584-5132

※補修部品の保有期間は、製造中止後8年とさせていただきます。

### ● ご使用方法、商品のお問い合わせ

モイスティーナサロン、ビューティアドバイザー または、  
株式会社ホームイオン研究所「お客様相談係」まで  
TEL:0120-4379-39

## 12 仕様

#### 【電氣的仕様】

電 源：直流16[V]  
消費電流：360[mA]  
パルス出力：SOFT、LOW、HIGH  
周 波 数：1200[Hz]、4800[Hz]  
温 度：LOW、HIGH、OFF

#### 【本体仕様】

本 体 寸 法：W198×H42×D104[mm]  
重 量：約450g(ACアダプター含まず)  
付 属 品：ACアダプター

 **HOMER ION**

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 17-2

TEL:0120-4379-39

10:00～16:00 (土・日・祝日をのぞく)